

MePill



Secondo i dati Eurostat, il numero di persone over 65 in UE è destinato a crescere fino ai 141 milioni nel 2050. Questo incremento porterà a un incremento nelle malattie cardiovascolari, mentali, cancro, diabete mellito e problemi ossei.



La letteratura mostra come l'aderenza alla terapia sia attorno ai 50% dei pazienti: conseguentemente il restante 50 non assume le medicine come prescritto dal medico curante.



Perché MePill™?

Perché con MePill™ prendermi cura di me è facile come bere un bicchiere d'acqua... LETTERALMENTE!


Ma cos'è MePill™?

MePill™ è un portapillole progettato per aiutare nella gestione della terapia farmacologica.

E' composto da una scatola che contiene dei cassettei, delle luci led, un alimentatore e un display.

E' dotato di un sistema GSM che invia SMS riguardanti l'apertura dei cassettei e il funzionamento del dispositivo



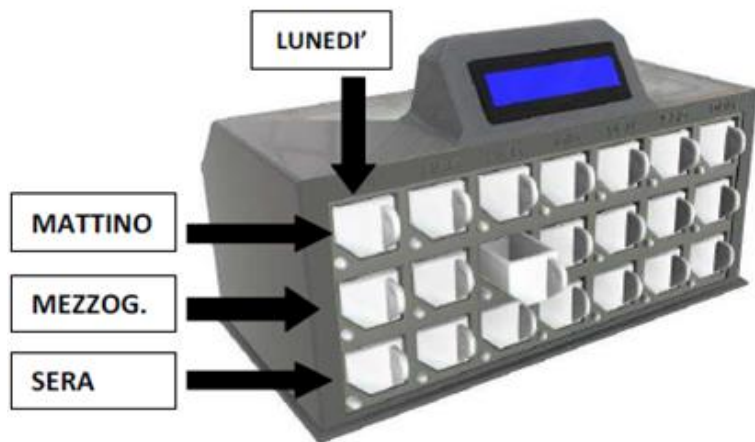

Com'è fatto?

MePill è costituito da un box, un display e cassetti estraibili, un alimentatore con relativo alloggiamento della parte posteriore del portapillole.

Sulla parte superiore è presente un pulsante rosso che, una volta premuto, invia un SMS al numero predisposto con scritto: 'Ho premuto il pulsante di emergenza del MePill data-ora, Contattami'.


Come funziona?

Ogni colonna corrisponde ad un giorno della settimana. Ogni riga corrisponde ad una fascia oraria della giornata, la prima riga segnata dalla freccia corrisponde al mattino (ore 8.00), la seconda al pranzo (ore 12.00) la terza alla sera (ore 20.00).

È sufficiente inserire le pillole nel MePill secondo lo schema. Ogni cassetto, quindi, rappresenta un giorno e un orario di terapia.

Una volta aperto il cassetto con led illuminato verrà inviato un SMS al numero preposto 'Apertura cassetto con data e ora'. Inoltre, ogni mattina riceverà un sms con scritto 'MePill acceso e funzionante'.

Una volta assunte le pillole inserire il cassetto nell'apposito alloggiamento.

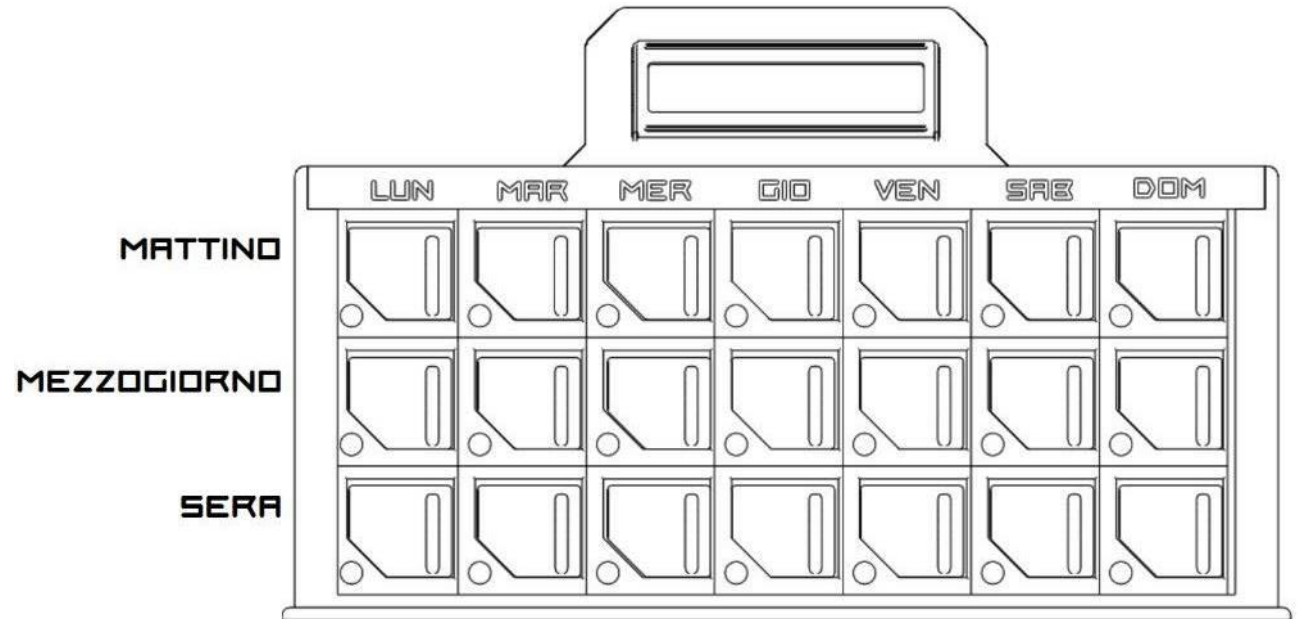

Perché MePill™?

- Una garanzia di assunzione
- La cura per tutte le tue malattie, a portata di palmo di mano
- Intervento repentino in caso di non assunzione
- Possibilità di monitoraggio a distanza
- Educazione familiare alla terapia
- Autonomia del paziente, anche se senior
- Pillole «take away» con salvavita
- Obiettività delle informazioni per il medico curante



What's Next?



Fornire il mepill di
una telecamera



Creazione di un' app
che monitora l'intera
salute del paziente



Personalizzazione
del dispositivo



Creazione storico dei
parametri e della
terapia e dello stato
di salute generale

«Drugs don't work in patient who don't take them»

« Le medicine non hanno effetto sui pazienti che non le assumono»

- Koop

MePill™

- CONTATTI -

Bernardo Moronato

Cell +39 348 22 83 383

[Mailto b.moronato@innovazionesumisura.it](mailto:b.moronato@innovazionesumisura.it)

Si ricorda che il dispositivo il MePill™ è un marchio depositato inoltre è un prodotto protetto da domanda di brevetto.