

CNA Artigiani Imprenditori d'Italia

Padova e Rovigo

CON IL CONTRIBUTO DI:
sportello mentore
 per la competitività
CAMERA DI COMMERCIO PADOVA
 il futuro a portata di impresa

CONFCOMMERCIO
 IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM PADOVA

OBV
 OSSERVATORIO BIOMEDICALE VENETO

eumed
 partner per il settore biomedicale

Filiere dell'ottica: innovazione e adeguamento normativo

6 ottobre 2025
Ore 17

DAL LABORATORIO AL MERCATO: LE NOSTRE LENTI RGP CERTIFICATE MDR

Barbara Ossani
 Fabio Busato
 ESAHORUS - Produzione di LENTI RGP

Horus
 CONTACT LENSES



Nel 2023 Esavision Technology srl acquisisce Horus snc realizzando un progetto nuovo ma con fondamenta solide: unisce i 40 anni di esperienza nella produzione di lenti a contatto RGP di Horus alla struttura commerciale e all'ottima conoscenza del settore di Esavision Technology

Dalle lenti sferiche più semplici, alle geometrie più complesse per le esigenze della contattologia specialistica, come l'ortocheratologia o le applicazioni sclerali, Horus è specializzata nell'intera gamma di lenti Gas Permeabili.

Grazie all'ampia scelta di materiali e di design disponibili, i nostri laboratori offrono la possibilità di personalizzare le lenti con lavorazioni specifiche.

Utilizziamo i prestigiosi materiali Boston per ottenere il massimo delle prestazioni in termini di stabilità, bagnabilità e resistenza.



LA NOSTRA MISSION: IL NOSTRO SCOPO

La nostra mission è aiutare e supportare concretamente il professionista della visione in ogni area della sua attività professionale, fornendo formazione adeguata a operare il più possibile in autonomia, prodotti di eccellente qualità e un supporto tecnico puntuale e preciso per risolvere efficacemente anche i casi più complessi.

➔ *Ovvero: Fornire ai professionisti della visione una gamma di lenti a contatto RGP di qualità e precisione assoluta, affinché i loro portatori ottengano la **migliore visione possibile***

VISION :

In Horus ogni lente è un capolavoro di precisione, progettata per superare ogni aspettativa.



I NOSTRI PRODOTTI

LENTI
CORNEALI


LENTI
ORTO-K

LENTI
MINISCLERALI

**Geometrie Sferiche,
Asferiche, Toriche, per
Cheratocono e
Inverse,**
personalizzabili e
ottimizzate per la
gestione topografica
corneale.

Le S3 Orthokey. Sono lenti per **ortocheratologia** sviluppate e prodotte interamente dal nostro laboratorio per garantire a ogni prodotto massima precisione e prestazioni elevate: OrthoOne, S3, S3-R, OrthoOne Evolution. Siamo inoltre distributori di Paragon CRT.

Le lenti Custom Stable™ di Valley Contax offrono un'ottima soluzione per cornee difficili o quando RGP e lenti morbide non bastano, garantendo comfort, stabilità e visione grazie al diametro grande, con applicazione semplice e alta personalizzazione.

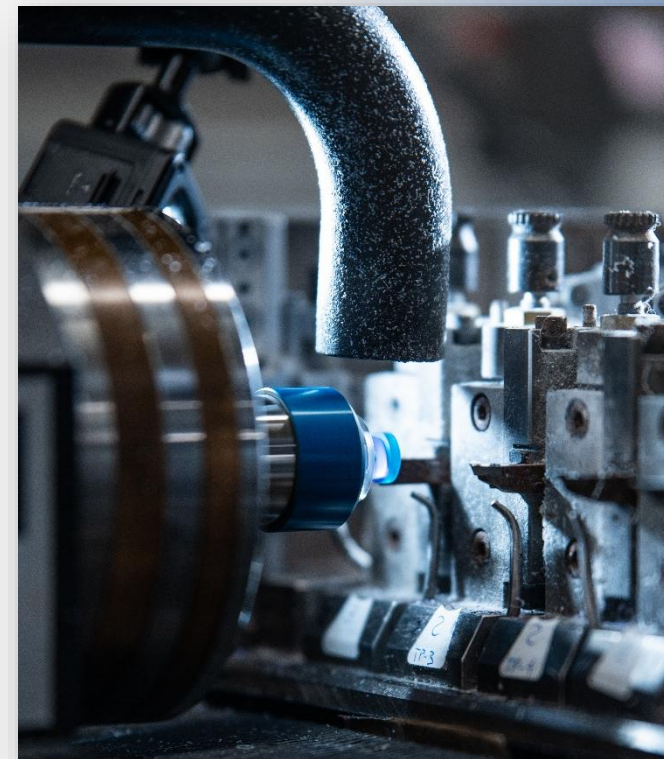

Offriamo la possibilità di progettare e applicare **geometrie personalizzate** attraverso l'utilizzo di software di progettazione. Il nostro laboratorio è disponibile per la produzione di ogni tipo di geometria.





MATERIALI

Utilizziamo solo i migliori materiali CERTIFICATI per lenti perfette, in grado di soddisfare le esigenze degli applicatori più esigenti per il benessere dei propri portatori.

Precisione nel risultato, stabilità e eccellenti caratteristiche ottiche: questi sono i parametri con cui selezioniamo i materiali per realizzare le nostre lenti.

Puntiamo sulla qualità dei materiali più prestigiosi e affidabili per tutte le nostre lenti, selezionando con cura il materiale più adatto alle necessità fisiologiche del portatore. In questo modo, garantiamo una costante efficacia applicativa nel tempo.

L'utilizzo di torni a calibrazione micrometrica e il controllo di qualità individuale per ogni singola lente prodotta, assicura una qualità assoluta.



SET DI PROVA

I nostri Set di Prova contengono composizioni standard per offrire al portatore la possibilità di provare i vantaggi delle lenti RGP già alla prima visita.

I Set sono inoltre anche personalizzabili e disponibili nelle seguenti 3 versioni, con numero di lenti ridotte o ampliate rispetto allo standard.

Set RGP
(Sferiche, Asferiche,
Toriche, Cheratocono)

Set ORTHO-K
(Appoggio Sferico e
Appoggio Torico)

Set MINISCLERALI
CUSTOM STABLE
(Appoggio Sferico e
Appoggio Torico).

Per conoscere le caratteristiche tecniche dei set prova e le possibilità di personalizzazione, puoi scaricare la brochure dal nostro sito oppure contatta il nostro supporto tecnico.

Horus
CONTACT LENSES





Certificato UE del Sistema di Gestione della Qualità *EU Quality Management System Certificate*

Certificato N.
Certificate No.

0425-MDR-030100-00

Secondo l'Allegato IX Capo I e III del Regolamento UE 2017/745
According to Annex IX Chapter I and III of EU Regulation 2017/745

ORGANISMO NOTIFICATO / NOTIFIED BODY

ICIM S.p.A. - Identification number: 0425

Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO IX CAPO I E III
DEL REGOLAMENTO UE 2017/745 DICHIARA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ ATTUATO DA:
*ON THE BASIS OF THE ASSESSMENT PERFORMED ACCORDING TO ANNEX IX CHAPTER I AND III
OF EU REGULATION 2017/745 DECLARES THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ENFORCED BY:*

ESAHORUS S.R.L.

SEDE LEGALE E UNITÀ OPERATIVA / HEAD OFFICE AND OPERATIVE UNIT
VIA E. BERNARDI, 5 D/E 37026 PESCONTINA VR IT - Italia

Numero di Registrazione / *Single Registration Number:* **IT-MF-000037917**

PER I PRODOTTI, PROCESSI, SERVIZI RIPORTATI NELL'ALLEGATO
FOR THE PRODUCTS, PROCESSES, SERVICES LISTED IN THE ATTACHED ANNEX

Lenti a contatto

Contact lenses

È CONFORME AI REQUISITI / *IS IN COMPLIANCE WITH REQUIREMENTS*

Allegato IX Capo I e III del Regolamento UE 2017/745
Annex IX Chapter I and III of EU Regulation 2017/745

Per l'identificazione dei modelli di prodotto vedere l'Allegato / For identification of the model type see Annex

ATTENZIONE MASSIMA SULLA QUALITÀ

Attenzione alla qualità significa

- Materiali di Alta Qualità.
- Tecnologie di Produzione certificate.
- Sicurezza: Controlli e test clinici rigorosi.
- Rigorosi Controlli di Qualità: Ispezione visiva, test di integrità, consistenza delle proprietà ottiche.
- Conformità alle Normative Internazionali.
- Monitoraggio e Tracciabilità dei Lotti.
- Servizio consulenza pre e post applicazione.
- Formazione dedicata alla contattologia specialistica.




ORDINE TELEFONICO

L'ordine riporta sempre la sigla di chi l'ha ricevuto
Viene sempre riletto al cliente per conferma



ALLEGATO N° 17 ILGQ AM-02										RICEZIONE ORDINE MANUALE									
Data/ Add. <u>10/10/25</u>		Cod./DD <u>83612</u>		Cliente/DD <u>DE RIGHI</u>		Portatore <u>TONDEYNE</u>		Consegna U UU		11/1 106132-33									
Tipo riga <u>RSV</u>		N° Lente <u>1032649</u>		H I D C Q E S		Tipo riga <u>RS</u>		N° Lente <u>1032680</u>		H I D C Q E S									
Materiale/Colore						Materiale/Colore													
Geometria						Geometria													
r0- r1-r2-r3-r4-r5						r0- r1-r2-r3-r4-r5													
00- 01- 02- 03- 04- 0T						00- 01- 02- 03- 04- 0T													
r0/r01 All.				Ecc r0		r0/r01 All.				Ecc r0									
Potere		F _v		Cyl		Ax		Add		Potere		F _v		Cyl		Ax		Add	
Potere S3		AaV		AdC		FdS		camera		Potere S3		AaV		AdC		FdS		camera	
Par. addizionali		tcj		tc		ter		l _A		Par. addizionali		tcj		tc		ter		l _A	
Lavorazione										Lavorazione									
Nota Int.		S		N		D		Nota Int.		S		N		D					
Nota d'ordine				<u>CONF. UGUALE</u>						CONF. UGUALE									

INSERIMENTO A SISTEMA E PROGETTAZIONE

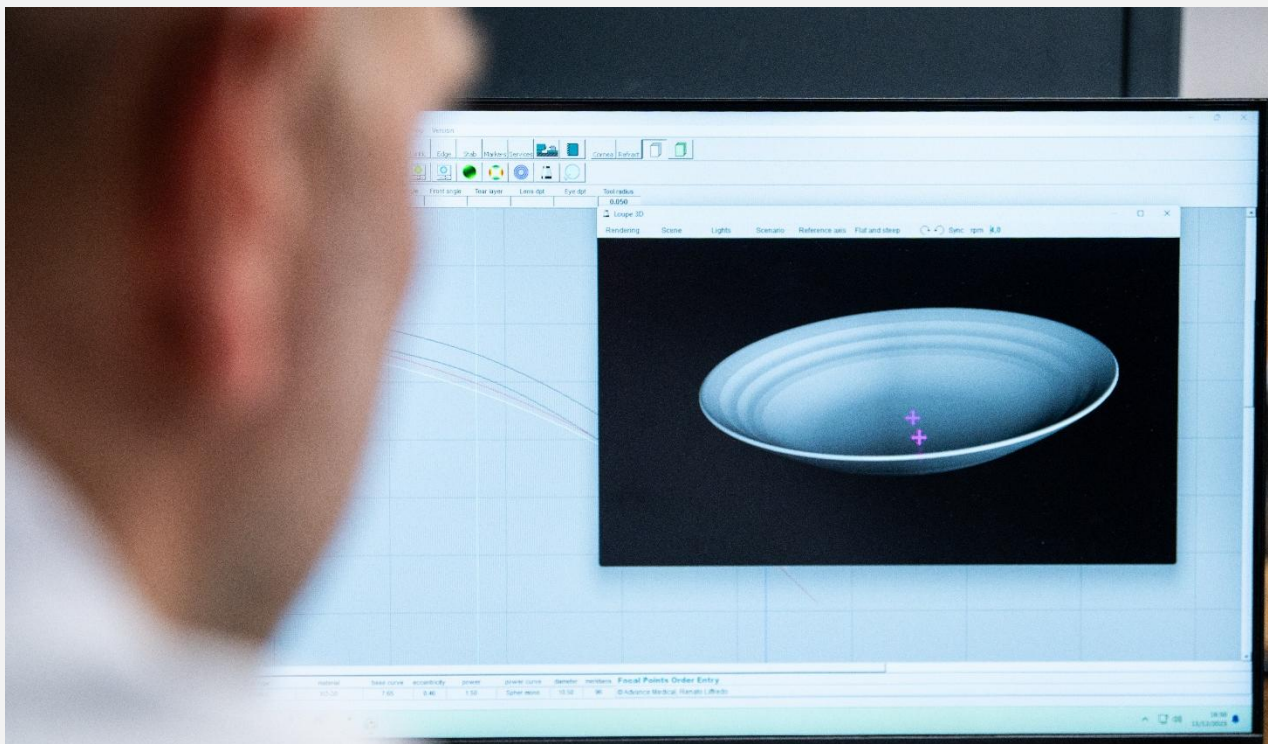

R.base (r0)		7,70	D.tot ØT	9,60	Cilindro (Cyl)	
1ª r.b. (r1)			Ecc. Ø0	0,30	Asse (Ax)	
2ª r.b. (r2)			r0/r01 All		D. lac	
3ª r.b. (r3)			AaV		Z.o.e. (Øa0)	
4ª r.b. (r4)			AdC		R.b. mis.	
5ª r.b. (r5)			FdS		ØT mis.	
Z.ott. Ø0			Sp.c. (tc)	0,250	F'v mis.	
Z.ott. Ø01			Sp.b. (e)		tc mis.	
Z.ott. Ø1			Sp. ta		Ultimo Agg.	nino1
Z.ott. Ø2			Potere F'v	-2,25		
Z.ott. Ø3			Camera			
Z.ott. Ø4			Ecc ra0	-0,81		

Cod.Ordine	Riga	Tipo	L. Assoc.(F8)	L. Agganc(F9)	L. Radice	Lotto
21965456	1	RS	1046133	1032679	0473848	23361004

N.	COD	LAVORAZIONE	VAL	DATA	PREZZO	Sc1	Sc2	IMPORTO
1	HVIP	VIP	+2,75	07/01/2025	31,00	20	20	19,8400
2	L012	Trattamento al Plasma		07/01/2025	5,00	20	20	3,2000

N.	NOTA	Int.
1	SP3 design PA	S
2	P-100 taglio FP MD244110 TRD	S
3	P-110 taglio FP MD244110 TRD - Add +2,75 D	S
4	riordino 1032679 del 12/2023 scaduta da 10 giorni	N

Data ordine	07/01/2025	Stato Lente	Evasa
Data c. prev	13/01/2025	Consegna	Normale
Data sped.	13/01/2025	N. D. D. T.	309383
Data Sp Unica		Reso	☐

OK Annulla

F3: Ricerca Ordini - ^ F3 Riesame - F5: Albero - F7: Variazione Ordine - F8: Lente Associata - F9: Lente Agganciata - F11: Sets Cliente

CONTROLLO INSERIMENTO

Num. Lente **1-04-61-32** (Ass. 1-04-61-33 sp.13/01/2025)
 Cod.Ordine 21-96-54-56/1 (RS su 1032679)
 Data ordine 07/01/2025 Data Cons 13/01/2025 - Normale
Materiale HXOO-Boston XO Viola-VI Lotto 23361004
Geometria HPA3 - Per.Variante Asferica 0.3
 Occhio D Puntino **SI**
 Portatore **MARIANNE**
 Cliente 000836 - DE RIGNON V & C SNC DI DE RIGNON
 000002 DE RIGNON V & C SNC DI DE RIGNON

r0	7,70	Ø0	Ecc.Ø0	0,30
Toll.r0		Ø01	C.Fin.	
r0 fin.				
r1		Ø1	r0/r01 All	
r2		Ø2	AaV	
r3		Ø3	AdC	
r4		Ø4	FdS	
r5		ØT	9,60	Camera
Fv	-2,25	Toll.ØT	D. lac	
Toll.Fv		te	ta	
tc	0,250	Fv Mis.		Disinfz.
Toll.tc				
Cyl		Ax		

Lav: HVIP - ViP (Addizione per vicino +2,75)
 L012 - Trattamento al Plasma

Note * SP3 design PA
 * P-100 taglio FP MD244110 TRD
 * P-110 taglio FP MD244110 TRD - Add +2,75 D
 riordino 1032679 del 12/2023 scaduta da 10 giorni

Ecc ra0	-0,81	Øa0	FORM A-10 Rev.7 27/08/2018
Sag		ra0	Ins. nino1
Lea		ra1	Linea HORUS

L'ordine viene confrontato con il modulo per la produzione



ALLEGATO N° 17 ILGQ AM-02				RICEZIONE ORDINE MANUALE			
Data/Ord.	Cod. DD	Cliente/DD	Portatore	Consegna U UU			
07/01/2025	21-96-54-56/1	DE RIGNON V & C SNC DI DE RIGNON	MARIANNE				
OD	Puntino						
Tipo riga	N° Lente	H I D C Q E S		Tipo riga	N° Lente	H I D C Q E S	
1032679	1032680			1032680	1032680		
Materiale/Colore				Materiale/Colore			
Geometria				Geometria			
r0- r1-r2-r3-r4-r5				r0- r1-r2-r3-r4-r5			
Ø0- Ø1- Ø2- Ø3- Ø4- ØT				Ø0- Ø1- Ø2- Ø3- Ø4- ØT			
r0/r01 All.				r0/r01 All.			
Ecc r0				Ecc r0			
Potere	Fv	Cyl	Ax	Potere	Fv	Cyl	Ax
Potere S3	AaV	AdC	FdS	Potere S3	AaV	AdC	FdS
Par. addizionali	tcj	tc	ter	Par. addizionali	tcj	tc	ter
Lavorazione				Lavorazione			
Nota Int.	S	N	D	Nota Int.	S	N	D
Nota d'ordine	CONF. UGUALE			Nota d'ordine	CONF. UGUALE		

PRODUZIONE – TAGLIO BASE


Num. Lente **1-04-61-32** (Ass. 1-04-61-33 sp.13/01/2025)
 Cod.Ordine 21-96-54-56/1 (RS su 1032679)
 Data ordine 07/01/2025 Data Cons 13/01/2025 - Normale
 Materiale **HX00-Boston XO-VI** Lotto 23361004
 Geometria **HPA3 - Per.Variante Asferica 0.3**
 Occhio D **Puntino** **SI**
 Portatore **MARIANNE**
 Cliente 000836
 000002

7,70 $\emptyset 0$ Ecc. $\emptyset 0$ 0,30
 Coll. r0 $\emptyset 01$ C.Fin. ☒
 0 fin.
 1 $\emptyset 1$ r0/r01 All
 2 $\emptyset 2$ AaV
 3 $\emptyset 3$ AdC
 4 $\emptyset 4$ FdS
 5 $\emptyset T$ 9,60 Camera
 Fv -2,25 Toll. $\emptyset T$ D. lac
 Coll. Fv te ta
 c 0,250 Fv Mis. Disinf. ☒
 Coll. tc 026
 2yl Ax

Lav: HVIP - ViP (Addizione per vicino +2,75)
 L012 - Trattamento al Plasma

Note * SP3 design PA
 * P-100 taglio FP MD244110 TRD
 * P-110 taglio FP MD244110 TRD - Add +2,75 D
 riordino 1032679 del 12/2023 scaduta da 10 giorni

Ecc ra0 -0,81 $\emptyset a0$ FORM A-10 Rev.7 27/08/2018
 Sag ra0 Ins. nino1
 Lea ra1 Linea HORUS

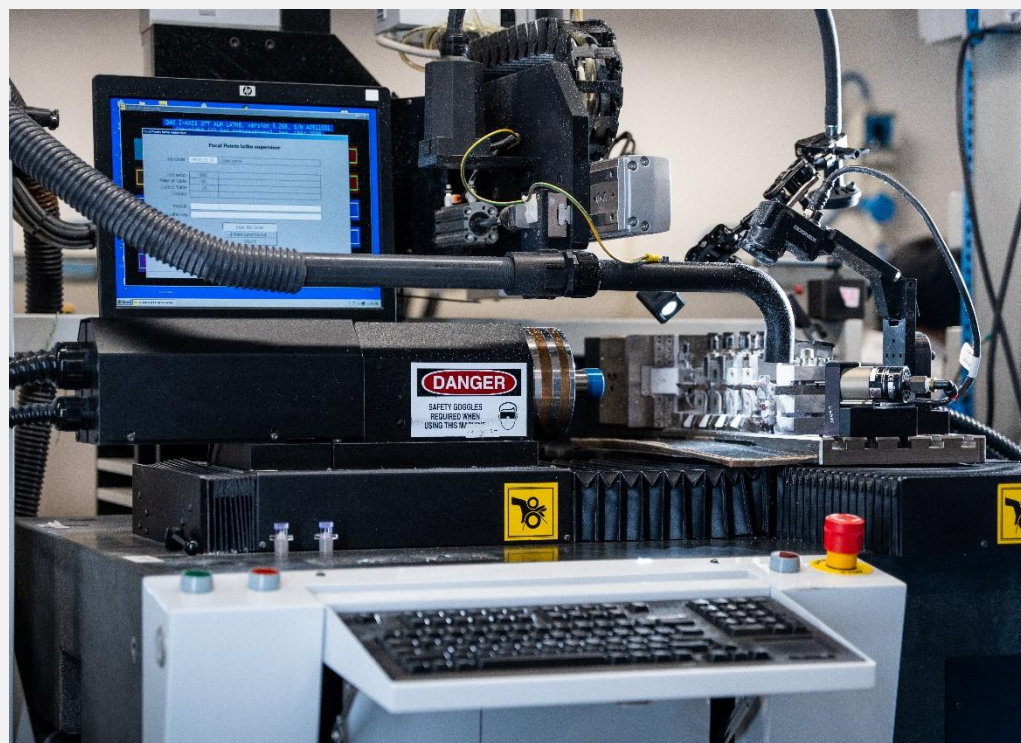

PRODUZIONE – LUCIDATURA BASE

Num. Lente **1-04-61-32** (Ass. 1-04-61-33 sp.13/01/2025)
 Cod.Ordine 21-96-54-56/1 (RS su 1032679)
 Data ordine 07/01/2025 Data Cons 13/01/2025 - Normale
 Materiale **HX00-Boston XO-VI Lotto 23361004**
 Geometria **HPA3 - Per.Variante Asferica 0.3**
 Occhio D Puntino **S1**
 Portatore MARIANNE
 Cliente 000836
 000002

7,70 Ø0 Ecc.Ø0 0,30
 r0/r01 All C.Fin. ✓
 0 fin.
 1 Ø1 AaV
 2 Ø2 AdC
 3 Ø3 FdS
 4 Ø4 Camera
 5 ØT 9,60 D. lac
 Fv -2,25 Toll.ØT ✓ te ✓ ta
 Toll.Fv
 c 0,250 Fv Mis. 0178 Disinf. ✓
 Toll.tc 026
 Syl Ax

av: HVIP - ViP (Addizione per vicino +2,75)
 L012 - Trattamento al Plasma ✓

Note * SP3 design PA
 * P-100 taglio FP MD244110 TRD
 * P-110 taglio FP MD244110 TRD - Add +2,75 D
 riordino 1032679 del 12/2023 scaduta da 10 giorni

Ecc ra0 -0,81 Øa0 FORM A-10 Rev.7 27/08/2018
 Sag ra0 Ins. nino1
 .ea ra1 Linea HORUS



PRODUZIONE – TAGLIO ESTERNO


Num. Lente **1-04-61-32** (Ass. 1-04-61-33 sp.13/01/2025)
 Cod.Ordine 21-96-54-56/1 (RS su 1032679)
 Data ordine 07/01/2025 Data Cons 13/01/2025 - Normale
 Materiale **HX00-Boston XO-VI Lotto 23361004**
 Geometria **HPA3 - Per.Variante Asferica 0.3**
 Occhio D **Puntino SI**
 Portatore **MARIANNE**
 Cliente 000836
 000002

0 7,70 Ø0 Ecc.Ø0 0,30
 Coll.r0 Ø01 C.Fin. ✓
 0 fin.
 1 Ø1 r0/r01 All
 2 Ø2 AaV
 3 Ø3 AdC
 4 Ø4 FdS
 5 ØT 9,60 Camera
 Fv -2,25 Toll.ØT ✓ D. lac
 Coll.Fv te ✓ ta
 c 0,250 Fv Mis. Ax Disinf. ✓
 Coll.tc 026

av: HVIP - ViP (Addizione per vicino +2,75)
 L012 - Trattamento al Plasma ✓

Note * SP3 design PA
 * P-100 taglio FP MD244110 TRD
 * P-110 taglio FP MD244110 TRD - Add +2,75 D
 riordino 1032679 del 12/2023 scaduta da 10 giorni

Ecc ra0 -0,81 Øa0 FORM A-10 Rev.7 27/08/2018
 Sag ra0 Ins. nino1
 .ea ra1 Linea HORUS

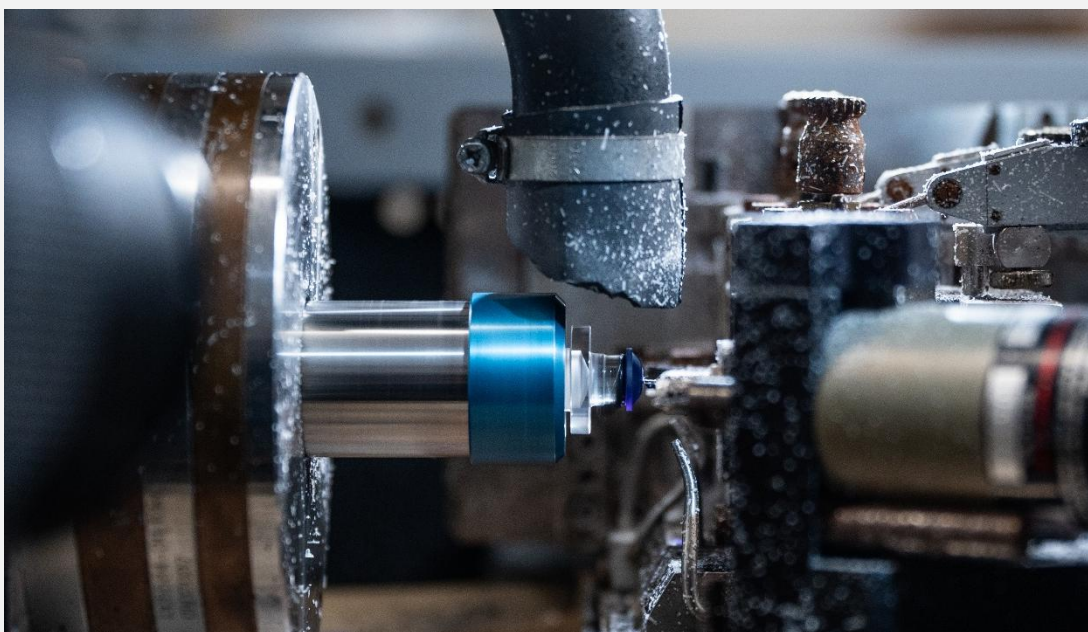

PRODUZIONE – LUCIDATURA ESTERNA

num. Lente **1-04-61-32** (Ass. 1-04-61-33 sp.13/01/2025)
 Cod.Ordine 21-96-54-56/1 (RS su 1032679)
 Data ordine 07/01/2025 Data Cons 13/01/2025 - Normale
 Materiale **HX00-Boston XO-VI Lotto 23361004**
 Geometria **HPA3 - Per.Variante Asferica 0.3**
 Occhio **D Puntino SI**
 Portatore **MARIANNE**
 Cliente 000836 - **DE**
 000002 - **DE**

75 0 7,70 Ø0 Ecc.Ø0 0,30
 Coll.r0 Ø01 C.Fin. ✓
 0 fin.
 1 Ø1 r0/r01 All
 2 Ø2 AaV
 3 Ø3 AdC
 4 Ø4 FdS
 5 ØT 9,60 Camera
 Fv -2,25 Toll.ØT ✓ D. lac
 Coll.Fv te ✓ ta
 c 0,250 Fv Mis. Disinfex. ✓
 Coll.tc 026
 56 2yl Ax
 av: HVIP - ViP (Addizione per vicino +2,75)
 L012 - Trattamento al Plasma ✓
 PP

Note * SP3 design PA
 * P-100 taglio FP MD244110 TRD
 * P-110 taglio FP MD244110 TRD - Add +2,75 D
 riordino 1032679 del 12/2023 scaduta da 10 giorni

Ecc ra0 -0,81 Øa0 FORM A-10 Rev.7 27/08/2018
 3ag ra0 Ins. nino1
 .ea ra1 Linea HORUS



PRODUZIONE – LAVORAZIONE BORDO

3-5
num. Lente **1-04-61-32** (Ass. 1-04-61-33 sp.13/01/2025)

Cod.Ordine 21-96-54-56/1 (RS su 1032679)

Data ordine 07/01/2025 Data Cons 13/01/2025 - Normale

Materiale **HX00-Boston XO-VI** Lotto 23361004

Geometria **HPA3 - Per.Variante Asferica 0.3**

Occhio **D Puntino SI**

Portatore **MARIANNE**

Cliente 000836 -

000002 -

78 0 7,70 Ø0 Ecc.Ø0 0,30

Coll.r0 Ø01 C.Fin. ✓

0 fin.

1 Ø1 r0/r01 All

2 Ø2 AaV

3 Ø3 AdG

4 Ø4 FdS

5 ØT 9,60 Camera

Fv -2,25 Tok ØT ✓ D. lac

Coll.Fv te ta

c 0,250 Fv Mis. Disinf. ✓

Coll.tc 026

2yl Ax

av: HVIP - ViP (Addizione per vicino +2,75)

L012 - Trattamento al Plasma ✓

PP

Note

* SP3 design PA

* P-100 taglio FP MD244110 TRD

* P-110 taglio FP MD244110 TRD - Add +2,75 D

riordino 1032679 del 12/2023 scaduta da 10 giorni

Ecc ra0 -0,81 Øa0 FORM A-10 Rev.7 27/08/2018

3ag ra0 Ins. nino1

.ea ra1 Linea HORUS



PRODUZIONE - PULIZIA

Num. Lente **1-04-61-32** (Ass. 1-04-61-33 sp.13/01/2025)

Cod.Ordine 21-96-54-56/1 (RS su 1032679)

Data ordine 07/01/2025 Data Cons 13/01/2025 - Normale

Materiale **HX00-Boston XO-VI** Lotto 23361004

Geometria **HPA3 - Per.Variante Asferica 0.3**

Occhio **D Puntino SI**

Portatore **MARIANNE**

Cliente 000836

000002

0 7,70 Ø0 Ecc.Ø0 0,30

Toll.r0 Ø01 C.Fin. ✓

0 fin.

1 Ø1 r0/r01 All

2 Ø2 AaV

3 Ø3 AdC

4 Ø4 FdS

5 ØT 9,60 Camera

TV -2,25 Toll.ØT ✓ D. lac

Toll.Fv te ✓ ta

c 0,250 Fv Mis. Disinfz. ✓

Toll.tc 026

2yl Ax

av: HVIP - ViP (Addizione per vicino +2,75)

L012 - Trattamento al Plasma ✓

FP

Note

* SP3 design PA

* P-100 taglio FP MD244110 TRD

* P-110 taglio FP MD244110 TRD - Add +2,75 D

riordino 1032679 del 12/2023 scaduta da 10 giorni

Ecc ra0 -0,81 Øa0 FORM A-10 Rev.7 27/08/2018

3ag ra0 Ins. nino1

.ea ra1 Linea HORUS



PRODUZIONE – CONTROLLO QUALITA'


Num. Lente **1-04-61-32** (Ass. 1-04-61-33 sp.13/01/2025)
 Cod.Ordine 21-96-54-56/1 (RS su 1032679)
 Data ordine 07/01/2025 Data Cons 13/01/2025 - Normale
 Materiale **HX00-Boston XO-VI Lotto 23361004**
 Geometria **HPA3 - Per.Variante Asferica 0.3**
 Occhio D **Puntino S1**
 Portatore **MARIANNE**
 Cliente 000836
 000002

7x 0 7,70 Ø0 Ecc.Ø0 0,30
 Coll.r0 Ø01 C.Fin. ✓
 0 fin.
 1 Ø1 r0/r01 All
 2 Ø2 AaV
 3 Ø3 AdC
 4 Ø4 FdS
 5 ØT 9,60 Camera
 Fv -2,25 Coll.ØT D. lac
 Coll.F'v te ta
 c 0,250 F'v Mis. Disinfz. ✓
 Coll.tc 026
 Syl Ax 0178

.av: HVIP - ViP (Addizione per vicino +2,75)
 L012 - Trattamento al Plasma ✓

Note * SP3 design PA
 * P-100 taglio FP MD244110 TRD
 * P-110 taglio FP MD244110 TRD - Add +2,75 D
 riordino 1032679 del 12/2023 scaduta da 10 giorni

Ecc ra0 -0,81 Øa0 FORM A-10 Rev.7 27/08/2018
 sag ra0 Ins. nino1
 .ea ra1 Linea HORUS

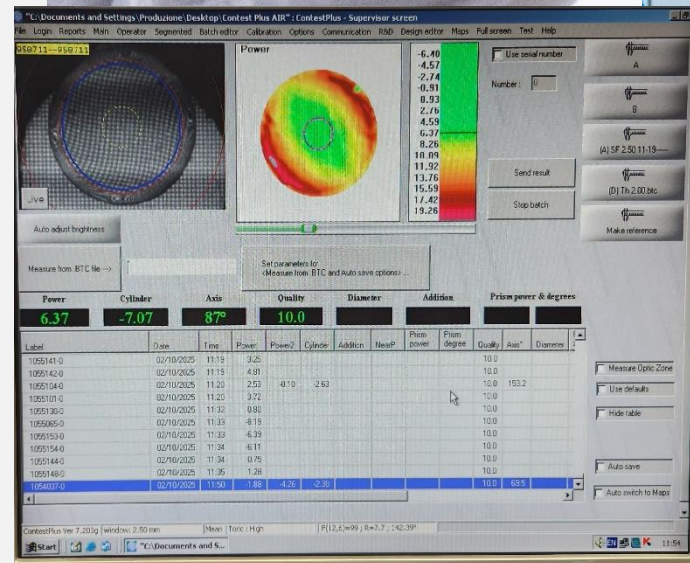

PRODUZIONE – TRATTAMENTO AL PLASMA

Num. Lente **1-04-61-32** (Ass. 1-04-61-33 sp.13/01/2025)
 Cod.Ordine 21-96-54-56/1 (RS su 1032679)
 Data ordine 07/01/2025 Data Cons 13/01/2025 - Normale
 Materiale **HXOO-Boston XO-VI Lotto 23361004**
 Geometria **HPA3 - Per.Variante Asferica 0.3**
 Occhio D **Puntino SI**
 Portatore **MARIANNE**
 Cliente 000836
 000002

78 0 7,70 Ø0 Ecc.Ø0 0,30
 Coll.r0 Ø01 C.Fin. ✓
 0 fin.
 1 Ø1 r0/r01 All
 2 Ø2 AaV
 3 Ø3 AdC
 4 Ø4 FdS
 5 ØT 9,60 Camera
 Fv -2,25 Toll.ØT ✓
 Coll.Fv te ✓
 c 0,250 Fv Mls. Disinfz. ✓
 Coll.tc 026
 Dyl Ax

.av: HVIP - ViP (Addizione per vicino +2,75)
 L012 - Trattamento al Plasma ✓

Note * SP3 design PA
 * P-100 taglio FP MD244110 TRD
 * P-110 taglio FP MD244110 TRD - Add +2,75 D
 riordino 1032679 del 12/2023 scaduta da 10 giorni

Ecc ra0 -0,81 Øa0 FORM A-10 Rev.7 27/08/2018
 3ag ra0 Ins. nino1
 .ea ra1 Linea HORUS



PRODUZIONE - DISINFEZIONE

3-5

Num. Lente **1-04-61-32** (Ass. 1-04-61-33 sp.13/01/2025)
Cod.Ordine 21-96-54-56/1 (RS su 1032679)
Data ordine 07/01/2025 Data Cons 13/01/2025 - Normale
Materiale **HX00-Boston XO-VI Lotto 23361004**
Geometria **HPA3 - Per.Variante Asferica 0.3**
Occhio D **Puntino SI**
Portatore **MARIANNE**
Cliente 000836
000002

78 0 7,70 Ø0 Ecc.Ø0 0,30
r0/r0 Ø01 C.Fin. ✓
0 fin.
1 Ø1 r0/r01 All
2 Ø2 AaV
3 Ø3 AdC
4 Ø4 FdS
5 ØT 9,60 Camera
Fv -2,25 Toll.ØT ✓ D. lac
Toll.Fv te ✓ ta
c 0,250 Fv Mis. 0178 Disinf. ✓
Toll.tc 026
Dyl Ax

av: HVIP - ViP (Addizione per vicino +2,75)
L012 - Trattamento al Plasma ✓

PP

Note * SP3 design PA
* P-100 taglio FP MD244110 TRD
* P-110 taglio FP MD244110 TRD - Add +2,75 D
riordino 1032679 del 12/2023 scaduta da 10 giorni

Ecc ra0 -0,81 Øa0 FORM A-10 Rev.7 27/08/2018
3ag ra0 Ins. nino1
.ea ra1 Linea HORUS



PRODUZIONE – ETICHETTA E CERTIFICATO



Horus
CONTACT LENSES

DE BIANCHETTI V. & C. SNC DI DE BIANCHETTI

Codice Cliente: 836/2

Occhio
DESTRO
con puntino

Lente # **1046132**

LENTE RIORDINATA
ENTRO L'ANNO

Riferimento: **PONTEVINE MARIANNE**

spedita il:
13-01-2025

Lente associata: 1046133

Lente precedente: 1032679

Geometria:
**PERIASFERICA ASFERICA
0.3 (HPA3)**

Materiale:
Boston XO Viola (HXOO)

F'v: -2,25

Ecc. r0: 0,30

r0: 7,70

ØT: 9,60

Lavorazione VIP (addizione)

ADD: +2,75

LAVORAZIONI

•HVIP - VIP (2,75)

•L012 - Trattamento al Plasma

•riordino 1032679 del 12/2023 scaduta da 10 giorni

Horus
CONTACT LENSES

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 01/23

La società Esahorus (codice SRN: IT-MF-000037917) con sede legale e unità produttiva in via Enrico Bernardi 5D-E, 37026, Settimo di Pescantina (Verona) in qualità di fabbricante del dispositivo medico **HPA3** denominato **PERIASFERICA ASFERICA 0.3**, destinato ad essere applicato sulla superficie oculare per la correzione dei normali difetti visivi e di quelli determinati da traumi ed interventi oculari: di classe di rischio IIa, in accordo alla *regola 5 dell'Allegato VIII del Regolamento UE 2017/745*, dichiara sotto la propria totale esclusiva responsabilità, che tale dispositivo:

- È conforme ai requisiti generali di sicurezza e prestazione ed alle disposizioni del *Regolamento (UE) 2017/745* come da Fascicolo Tecnico depositato presso l'ente;

- Non sono state utilizzate Specifiche Comuni per la conformità del dispositivo;

- È stato fabbricato in accordo al Fascicolo Tecnico n. DT 001 EH, che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato IX, capo I del sopra citato Regolamento, come da **Certificato n. 0425-MDR-030100-00**, rilasciato da **ICIM S.p.a.**, Piazza Don Enrico Mapelli, 75, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Organismo Notificato 0425, il 2/10/2024.

Settimo di Pescantina
(Verona),
2 Ottobre 2024

Esahorus S.r.l.
Il Legale Rappresentante
(Anna Zenato)

Anna Zenato

Horus
CONTACT LENSES **OD 1046132**

Geo:HPA3 Mat:HXOO

r0:7,70 Ø: 9,60

F'v: -2,25

ADD: +2,75

LAV: HVIP. L012

Esahorus s.r.l.
Via Enrico Bernardi 5D-E
37026 Pescantina (VR)

UDI LOT **1046132**

(01)0805024
7140115
(17)260113
(10)1046132



CE
0425



2025-01-13

MD

2026-01-13



PRODUZIONE - CONFEZIONAMENTO



Grazie per l'attenzione

